

Gebrauchsanweisung

Armlehne

(Montage und Gebrauch)

Die Armlehne wird viel in der Reha eingesetzt um z.B. bei halbseitig gelähmten Patienten den Arm zu stützen.

Die Armlehne ist einfach zu montieren und lässt sich bei Bedarf zur Seite wegklappen

Hebt man die Armlehne ein wenig an, rastet sie aus und kann zur Seite geschwenkt werden. Beim Zurückschwenken rastet sie selbstständig wieder ein.

Mit dieser Schraube erst Stange klemmen. *First screw in this holds to fix the rod.*

Die Armablage wird beim Kettwiesel AL im mittleren untern Loch und im oberen Langloch des Sitzgussetts mit zwei M6 Schrauben festgeschraubt. Die Schrauben werden erst soweit hinein geschraubt bis die Stange geklemmt ist, dann werden die Kontermuttern angezogen bis die Armablagen-halterung fest am Sitz fixiert ist. Durch Lösen der beiden M6 Mutern lässt sich die Lehne individuell in Höhe und Winkel einstellen. Der Schnellspanner (Kettwiesel AL) der Sitzstütze muss durch eine normale Schraube mit Mutter ersetzt werden, da sonst das Klappen behindert wird.

Beim Stahlsitz des Lepus wird die Armlehne über die Sitzbespannung mit zwei Befestigungsklemmen an das Sitzrohr geklemmt. Das überstehende untere Rohrende kann evtl. abgesägt werden.

Am Stahlsitz wird die Armlehne ans Sitzrohr geklemmt. *On a steelseat the armrest is mounted with clamps.*



Dann Kontermutter anziehen. *Then lock the nut.*

Überstehendes Rohrende evtl. absägen. *Overlapping pipe can be sawed off.*

M6 Muttern zum Einstellen des Winkels. *Loose M6 nuts to adjust angle and height.*

Schnellspanner durch Schraube und Mutter ersetzen. *Replace the quick-release of the seat stay by a normal screw and nut.*

Operating instructions

Armrest

(Installation and use)

The armrest is very often used for rehab purposes because it can support people who are hemiplegias.

The arm which has to be supported can be fixed with a simple hook-and-loop tape. You can assemble the armrest very easy and if you don't need it you can fold it sideways.

The armrest will be mounted on the Kettwiesel AL seat in the upper slot and the hole down in the seat gusset.

First screw in the M6 bolts so that they fix the rod, after that lock the nuts. The armrestholder is fixed now at the seatrack.

By loosening the two M6 nuts, the armrest can be adjusted in height and angle.


Replace the quick-release of the seat stay by a normal screw, otherwise the armrest can not be folded sideways.

When using the armrest at the Lepus steelseat, mount it with two clamps on the side of the seatube.

The overlapping pipe can be sawed off.


Gebrauchsanweisung Armlehne

STÜCKLISTE			
OBJEKT	ANZAHL	BEZEICHNUNG	ART.NR.
1	1	Lenkergriff	21369
2	1	Klemmung Halfeschale	22747
3	1	M8 Sicherungsmutter	
4	1	KW 06 Armablage Bolzen	22774
5	1	Halfeschale Armablage	21286
6	2	DIN 912 - M6 x 30	
7	2	DIN 934 - M6	
8	4	DIN 125 - A 6.4	
9	2	Armablage Halteklötz	22775
10	1	Schaumstoffauflage Armablage	22771
11	1	Armablage Haltewinkel	20521
12	2	M6 Sicherungsmutter	
13	1	M8 x 45 Schlossschraube	20818
14	1	Paßstift d=5 l=20	20871
15	1	Armablage Halteblock	20524
16	2	DIN 912 - M6 x 35	

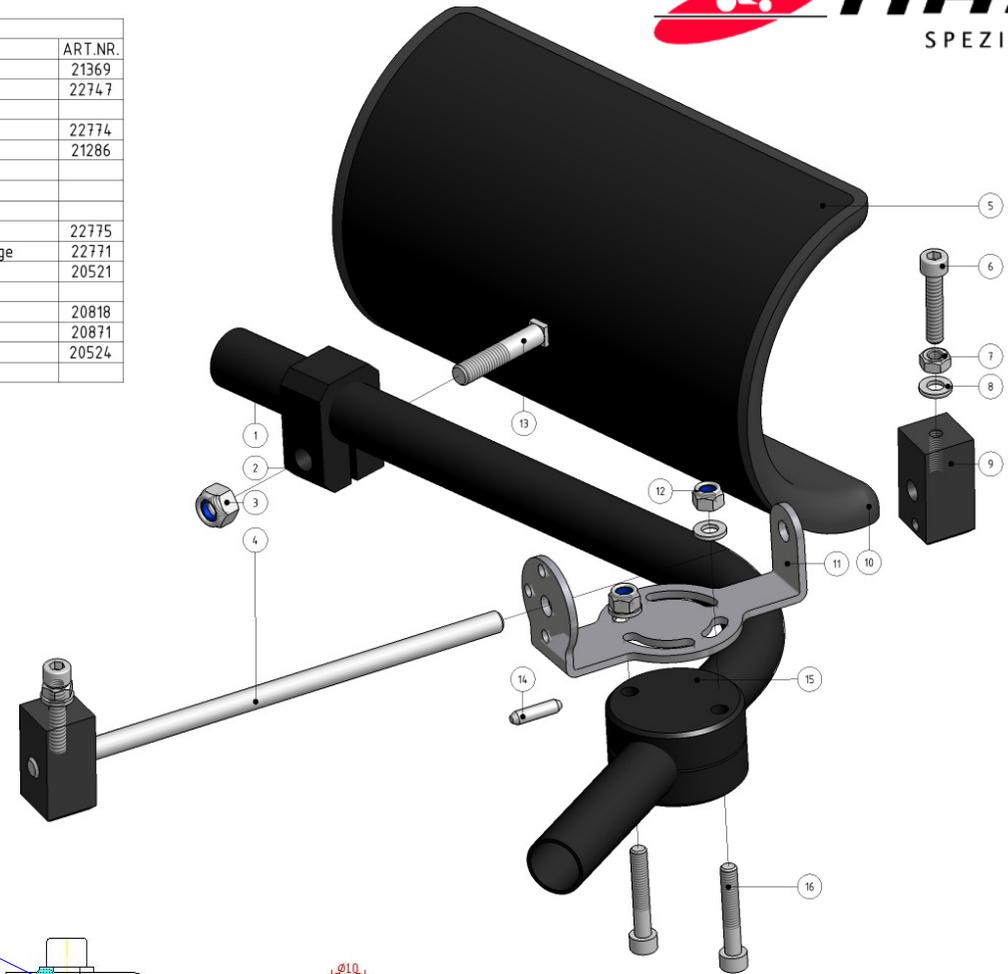

Kettwiesel AL

Baugruppe Armablage Befestigungsklaue Hase #20526

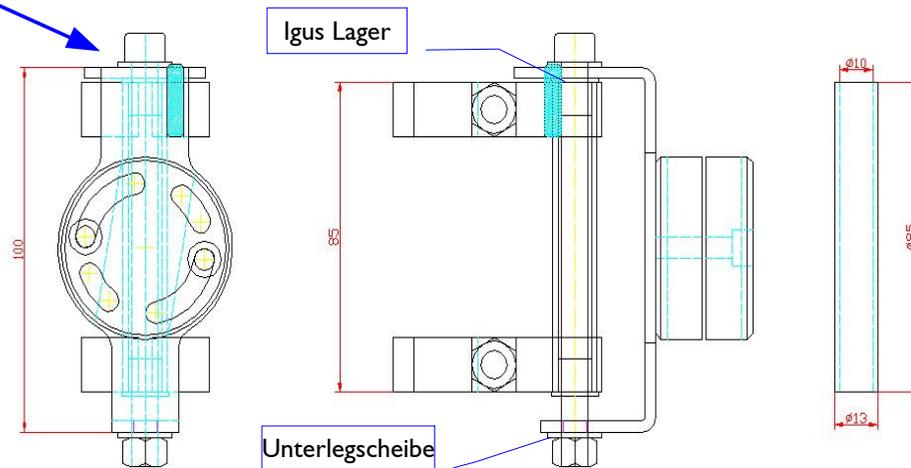

Lepus Stahlsitz